



Gerade Zähne brauchen Halt...

**Retainer
von ORTHOS**

orthos.de

Das schöne Ergebnis dauerhaft sichern: **Retention**

Für jeden Patienten die passende Lösung...

Endlich schöne, gerade Zähne! Um die neue Stellung der Zähne nach Abschluss der Zahnkorrektur dauerhaft zu stabilisieren und zu sichern ist die Retention besonders wichtig.

Wir von Orthos bieten verschiedene Arten von Retainern an, die alle individuell angepasst werden. So gibt es für jeden Patienten die passende Lösung.

Viele lächelnde Patienten wünscht Ihnen Ihr Orthos-Team

Wir von Orthos





RotkappchenRetainer

Vorteile: ermöglicht Eigenbeweglichkeit der Zähne, bedingt auch im Oberkiefer adaptierbar, extrem individuelle Anpassbarkeit, leicht zu platzieren durch die roten Kappchen

Nachteile: erhöhte Plaque-Retention

Material: Twistflex, Titan (0,4mm)



Retainer aus Gold

Vorteile: auch im Oberkiefer adaptierbar, biokompatibel, ermöglicht Eigenbeweglichkeit, warme Farbe

Nachteile: abhängig vom Goldpreis

Material: Twistflex aus Gold



Miniplastschiene

Vorteile: herausnehmbar, gut zu reinigen, unauffällig

Nachteile: Disziplin erforderlich
begrenzte Haltbarkeit




Klassischer Lingualretainer mit Klebasen auf den 3ern

Vorteile: einfache Positionierung, stabil, günstiger Preis

Nachteile: meist im OK nicht anwendbar (Bisshöhe),

Material: Stahl (normalerweise 0,6 mm)

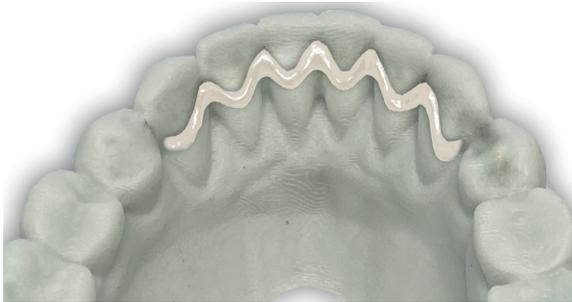

Retainer aus Keramik

Vorteile: sehr stabil, unsichtbar bei stark gekippter Zahnstellung oder Zahnlücken

Nachteile: relativ dick, schwer zu positionieren und schwierig zu kleben, darf nicht beschliffen werden, da sonst Spannungsrisse entstehen

Material: Zirkon




Retainer aus Titan

Vorteile: extrem hohe Präzision durch CAD, für Allergiker geeignet

Nachteile: aufwändig in der Herstellung

Material: Titan Grad 5, nickelfrei

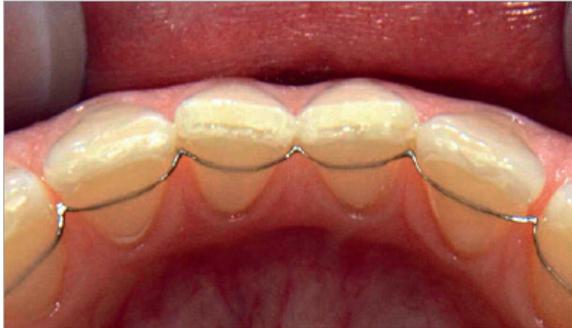

Memotain

Vorteile: erleichterte Mundhygiene, Zahnseide-tauglich, passgenau, perfekter Halt für die Zähne bei maximaler Elastizität

Nachteile: nur bei idealen Platzverhältnissen einsetzbar

Material: Nickel-Titan-Legierung



OrthoRetain

Vorteile: passgenau durch computergesteuerte Fertigung, erhöhte Stabilität, perfekter Tragekomfort

Nachteile: nur bei idealen Platzverhältnissen einsetzbar

Material: Stahl

Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG



Berner Straße 23
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 71 91 00 0
info@orthos.de

Über der Nonnenwiese 7
99428 Weimar
Tel.: 03643 80 80 0
weimar@orthos.de



ORTHOS AG
Rathausstrasse 14
6341 Baar
Tel.: +41 (0)41 500 64 88
info@orthos-ag.ch



ORTHOS Austria GmbH
Am Rosendorn 17 A
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236 38 42 32
info@orthos-austria.at



@orthosfachlaborgmbh
@harmonieschiene
@schlafharmonie



Weitere Orthos-Themen:



www.orthos.de
www.harmonieschiene.de/.ch/.at
www.schlafharmonie.de
www.auraschiene.de